

EVERFIT

MODELO: 101617

STYLE : 101617

Kit Desechable No Estéril

Non Sterile Disposable Kit

TELA SS 40 grms COLOR AZUL

FABRIC SS 40 grms BLUE COLOR

DISPOSITIVO MEDICO DE USO QUIRURGICO DESECHABLE NO ESTERIL

INSTRUCCION EMPAQUE/ PACKING INSTRUCTION



PIJAMA ①



BATA DRESS ②




POLAINA GATER ③



GORRO CAP ④

kit en bolsa vista parte delantera
kit in bag front view

kit en bolsa vista parte trasera
kit in bag rear view

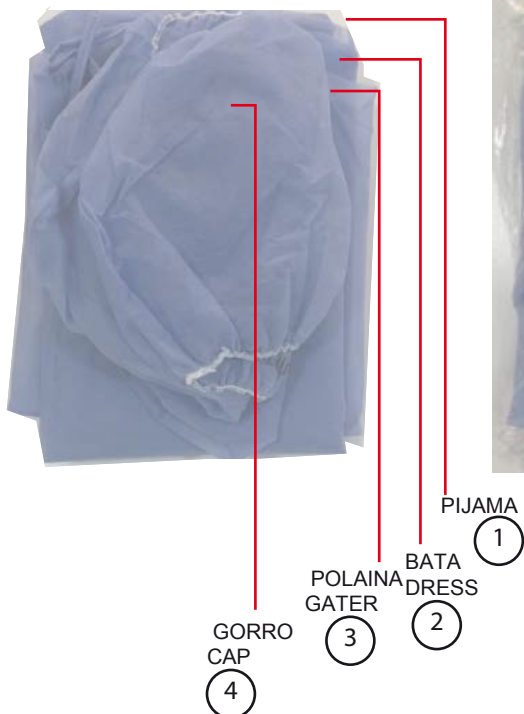

Empacar todas las prendas en bolsa de 26cm ancho por 40cm alto, y sellar con cinta transparente de 5cm en la parte trasera del kit.

Pack all the garments in a bag 26cm wide by 40cm high, and seal with 5cm transparent tape on the back of the kit.

00835170155412	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12X40 METROS x ROLLO	
1000737	BOLSA TRANSPARENTE P.P CAL 1 DE 28.5x40 CENTIMETROS PARA KIT	
1000743	ETIQUETA ADHESIVA 5.0 X 6.0 CMS KIT PRENDAS AZULES DESECHABLES X UND	

EVERFIT

MODELO: 101617

STYLE : 101617

Kit Desechable No Estéril

Non Sterile Disposable Kit

TELA SS 40 grms COLOR AZUL

FABRIC SS 40 grms BLUE COLOR

DISPOSITIVO MEDICO DE USO QUIRURGICO DESECHABLE NO ESTERIL

INSTRUCCION EMPAQUE/ PACKING INSTRUCTION

kit en bolsa vista parte delantera
kit in bag front view



6CM

KIT DESECHABLE NO ESTÉRIL

REFERENCIA: 101617

LOTE: XXXXXX

TALLA: ÚNICA, UNISEXO

CONTENIDO: 1 GORRO, 1 BATA, 1 PANTALÓN PIJAMA, 1 PAR DE POLAINAS

FECHA DE FABRICACIÓN: (MM/AA)

COMPOSICIÓN: 100% POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA



KIT DESECHABLE, NO ESTÉRIL



HECHO EN COLOMBIA

POR: EVERFIT S.A NIT 890900197-3

CODIGO IMPORTADOR: 890900197




Por favor escriba
el número de lote

Por favor escriba
La fecha de
fabricación (mes/año)

Código de barras para 737882

5CM

EVERFIT	Pijama Desechable No Estéril	Disposable Non-Sterile Pajamas
	TELA SS 40 grms COLOR AZUL	FABRIC SS 40 grms BLUE COLOR
	DISPOSITIVO MEDICO DE USO QUIRURGICO DESECHABLE NO ESTERIL	

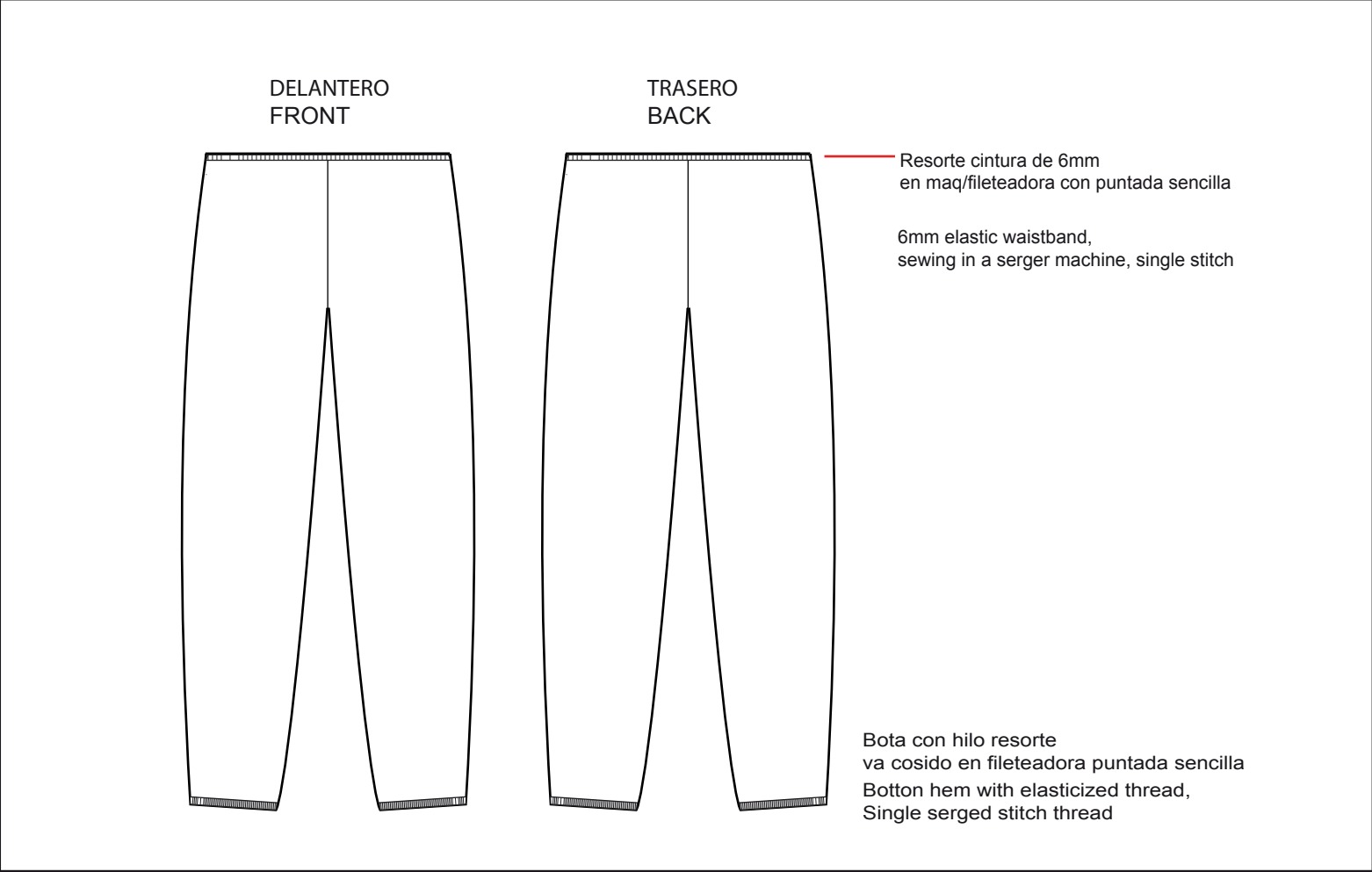

Costuras entrepierna, tiro trasero , tiro delantero en maquina fileteadora puntada sencilla

Hilo costura filete sencillo: Hilo en aguja calibre 120 y loopers con nylon texturizado

9 a 10 puntadas por pulgada en todas las operaciones

Inseam, back seam, front seam on single stitch serger machine

Single serged stitch thread: 120 gauge needle thread and loopers with textured nylon thread

9 to 10 stitches per inch in all operations

R0103897	FABRIC NON WOVEN POLYESTER 100% SS SPUNBOND 40 GRS C*BLUE WIDTH 2.00 MT		
1000653	ELASTICO N4 CRUDO COD 10403006 ANCHO 6MM 62%POLIESTER 38%CAUCHO		
1000734	HILO TEXTURIZADO DE NYLON 100/2 COLOR BLANCO X KILO		
1000738	HILO CAUCHO REF YC0010/000-0000-000 CONO POR 637 MTRS		
01047980229320	HILO EL SOL (COMETA) ART5020120 120 T-27 POLIES100% COLOR BLANCO CONO X 5000 YDS		

EVERFIT	Pijama Desechable No Estéril	Disposable Non-Sterile Pajamas
	TELA SS 40 grms COLOR AZUL	FABRIC SS 40 grms BLUE COLOR
	DISPOSITIVO MEDICO DE USO QUIRURGICO DESECHABLE NO ESTERIL	
INSTRUCCION EMPAQUE/ PACKING INSTRUCTION		
 1- Extender la prenda tiro delantero de frente. 1- Extend flat with front to up		 2- Doblar la prenda por mitad. 2- Fold the garment in half (leg over leg)
 3- Doblar tiro hacia parte delantera. 3- Fold in half again (lengthwise)		 4- Doblar a la mitad 4- Fold in half
 4- Doblar de nuevo 4- Fold again		 Prenda en bolsa vista parte frente Garment in front view bag

EVERFIT	Bata Desechable No Estéril	Non-Sterile Disposable Gown
	TELA SS 40 grms COLOR AZUL	FABRIC SS 40 grms BLUE COLOR
	DISPOSITIVO MEDICO DE USO QUIRURGICO DESECHABLE NO ESTERIL	

FRENTE
FRONT

Cuello sesgado
 cortar sesgo de entrada de 2.5cm, y salida de 0.6cm
 (sesgo que redoble por ambos lados)
 a una ag con pestaña a 1/16", dejar sesgo libre de 24cm a cada lado
 Consumo sesgo al hilo para tela de 2 mtrs de ancho es de 0.016

 Binding on neck,bias hemmed on both sides
 leaving 24 cm free at each end to form strips
 (cut bias 2.5cm width)
 Bias consumption: 0.016 (in the direction of the warp.
 For fabric of 2 mt width)

 Puño con hilo resorte
 va cosido en fileteadora puntada sencilla
 sleeve opening with elasticized thread,
 sew with serged stitch

 Cinturon de 4cm de ancho, puntas cuadradas
 sale en pieza, largo de 1.60cm, lleva perforado para la ubicacion.
 Fijar cinturon en el centro en maq/plana con un remate vertical
 de 1cm (lleva perforado para ubicar centro de cinturon)

 4cm wide belt, square ends,
 cut in pieces length 1.60cm according to the pattern,
 it has perforated for the location.
 Sew belt in the center in a flat sewing machine with a 1cm vertical bactakc
 (it has perforations to locate the center of the belt)

ESPALDA
BACK

Costuras: hombros, sisa en maquina filetadora con puntada sencilla.

Hilo costura filete sencillo: Hilo en aguja calibre 120 y loopers con nylon texturizado

9 a 10 puntadas por pulgada en todas las operaciones

Seams: shoulders and armhole in single-stitch serger machine.

Single serged stitch thread: 120 gauge needle thread and loopers with textured nylon thread

9 to 10 stitches per inch in all operations

R0103897	FABRIC NON WOVEN POLYESTER 100% SS SPUNBOND 40 GRS C* BLUE WIDTH 2.00 MT		
01047980229320	HILO EL SOL (COMETA) ART5020120 120 T-27 POLIES100% COLOR BLANCO CONO X 5000 YDS		
1000734	HILO TEXTURIZADO DE NYLON 100/2 COLOR BLANCO X KILO		
1000738	HILO CAUCHO REF YC0010/000-0000-000 CONO POR 637 MTRS		
00835170155412	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12X40 METROS x ROLLO		
1000739	ETIQUETA ADHESIVA 5.0 X 6.0 CMS BATA AZUL DESECHABLE X UND		
1000735	BOLSA TRANSPARENTE P.P CAL 1 DE 21.5x35 CENTIMETROS PARA BATA Y PIJAMA		

EVERFIT	Bata Desechable No Estéril	Non-Sterile Disposable Gown
	TELA SS 40 grms COLOR AZUL	FABRIC SS 40 grms BLUE COLOR

INSTRUCCION EMPAQUE/ PACKING INSTRUCTION

 1-Extender ó ubicar la prenda con la abertura hacia arriba. 1. Lay flat with opening up	 2- Doblar la prenda por centro frente 2- Fold the garment through the front center
 3- Colocar mangas sobre cuerpo 3- Place sleeves on the body	 4- Llevar costado a centro frente. 4- Place sleeves on the body
 5- Doblar a la mitad 5- Fold in half	 6- Doblar de nuevo 6- Fold again

EVERFIT


Polaina Desechable No Estéril

Non-Sterile Disposable gater

TELA SS 40 grms COLOR AZUL

FABRIC SS 40 grms BLUE COLOR


DISPOSITIVO MEDICO DE USO QUIRURGICO DESECHABLE NO ESTERIL

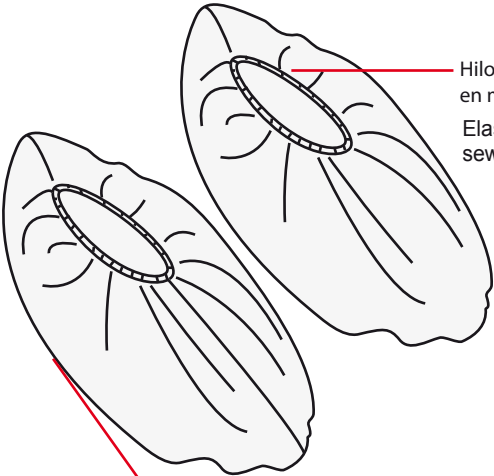

Hilo resorte en maq/fileteadora puntada sencilla
Elastic thread,
sewing with single stitch serger machine

Hilo resorte en base de polaina en maq/plana
20cm terminado

The gater is by pair,
sewing the ends with single stitch serger machine
20cm finished

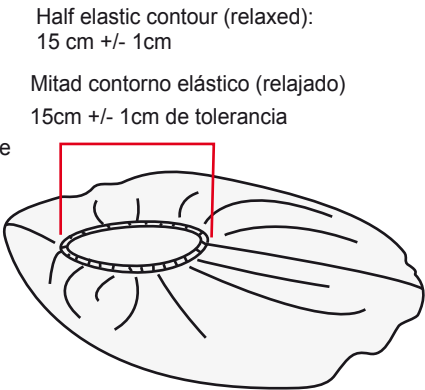

Half elastic contour (relaxed):
15 cm +/- 1cm

Mitad contorno elástico (relajado)
15cm +/- 1cm de tolerancia

LAS POLAINAS VAN POR PAR

Cerrar extremos en maq/fileteadora puntada sencilla

Hilo costura filete sencillo: Hilo en aguja calibre 120 y loopers con nylon texturizado

9 a 10 puntadas por pulgada en todas las operaciones

The gater is by pair, sewing the ends with single stitch serger machine.


Single serged stitch thread: 120 gauge needle thread and loopers with textured nylon thread

9 to 10 stitches per inch in all operations

R0103897	FABRIC NON WOVEN POLYESTER 100% SS SPUNBOND 40 GRS C*BLUE WIDTH 2.00 MT		
1000734	HILO TEXTURIZADO DE NYLON 100/2 COLOR BLANCO X KILO		
1000738	HILO CAUCHO REF YC0010/000-0000-000 CONO POR 637 MTRS		
01047980229320	HILO EL SOL (COMETA) ART5020120 120 T-27 POLIES100% COLOR BLANCO CONO X 5000 YDS		

EVERFIT	Polaina Desechable No Estéril	Non-Sterile Disposable gater
	TELA SS 40 grms COLOR AZUL	FABRIC SS 40 grms BLUE COLOR
	DISPOSITIVO MEDICO DE USO QUIRURGICO DESECHABLE NO ESTERIL	
INSTRUCCION EMPAQUE/ PACKING INSTRUCTION		
		
1- Formar par de polainas 1- Make a pair		2- Formar par sobreponiendo 2- Make a pair of gatters by placing one on top of the other
		
3- Doblar el par por mitad horizontalmente 3- Fold the pair in half horizontally		

EVERFIT	Gorro Desechable No Estéril	Non-Sterile Disposable Cap
	TELA SS 40 grms COLOR AZUL	FABRIC SS 40 grms BLUE COLOR
	DISPOSITIVO MEDICO DE USO QUIRURGICO DESECHABLE NO ESTERIL	

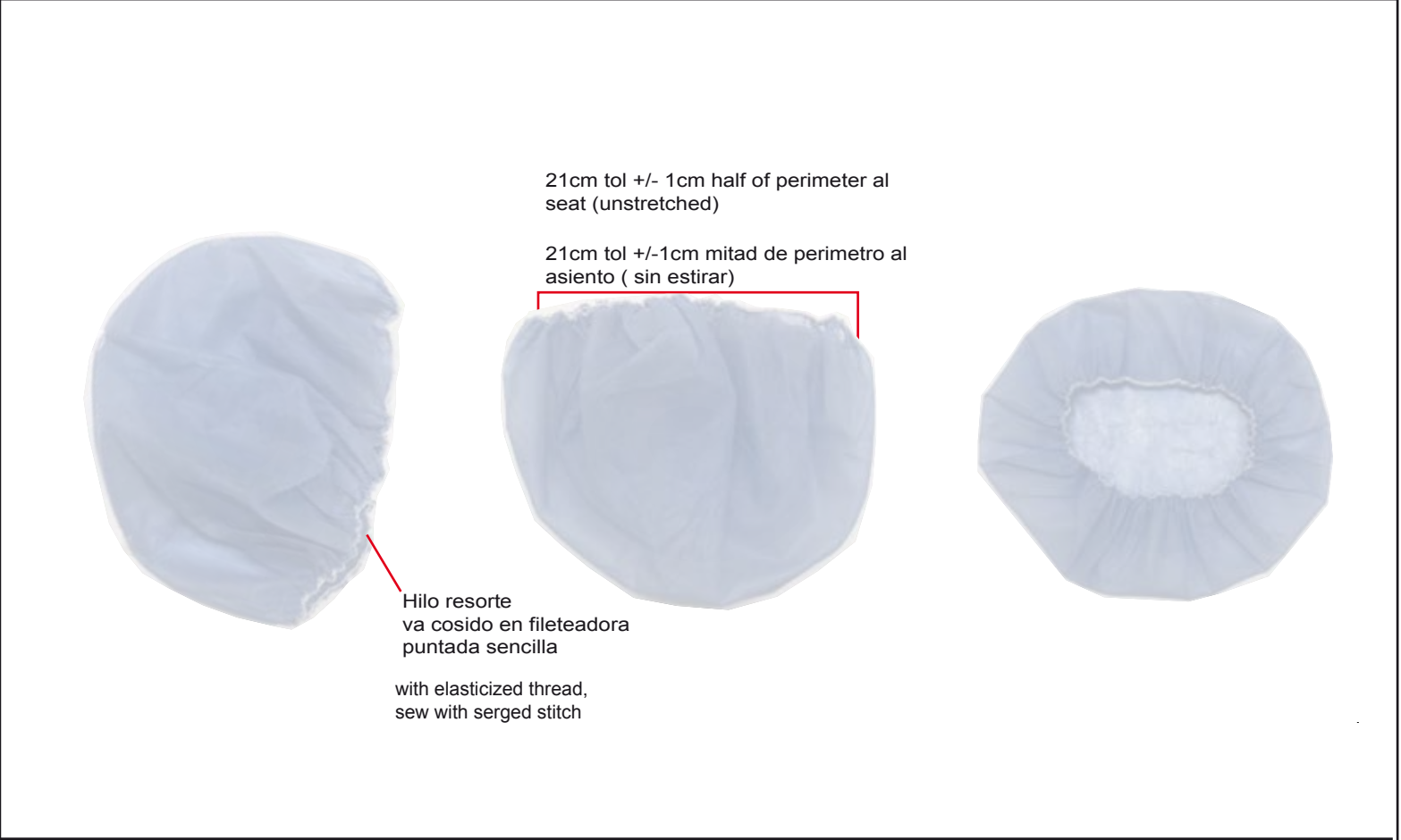

Hilo costura filete sencillo: Hilo en aguja calibre 120 y loopers con nylon texturizado

9 a 10 puntadas por pulgada en todas las operaciones

Single serged stitch thread: 120 gauge needle thread and loopers with textured nylon thread

9 to 10 stitches per inch in all operations

R0103897	FABRIC NON WOVEN POLYPROPYLENE 100% SS SPUNBOND 40 G/M2 C*BLUE WIDTH 2.00 MT		
1000734	HILO TEXTURIZADO DE NYLON 100/2 COLOR BLANCO JUMBO X 3 KILOS		
1000738	HILO CAUCHO REF YC0010/000-0000-000 CONO POR 637 MTRS		
01047980229320	HILO EL SOL (COMETA) ART5020120 120 T-27 POLIES100% COLOR BLANCO CONO X 5000 YDS		

EVERFIT	Gorro Desechable No Estéril	Non-Sterile Disposable Cap
	TELA SS 40 grms COLOR AZUL	FABRIC SS 40 grms BLUE COLOR
	DISPOSITIVO MEDICO DE USO QUIRURGICO DESECHABLE NO ESTERIL	
INSTRUCCION EMPAQUE/ PACKING INSTRUCTION		
		
1- Extender gorro, con elastico hacia arriba 2- extend the cap with the opening facing up	2- Doblar a la mitad 2- Fold in half	