

EVERFIT

MODELOS: 101610 STYLE: 101610

BATA AZUL HOSPITALARIA DESECHABLE

DISPOSABLE BLUE HOSPITAL DRESS


TELA SS 40 grms

FABRIC SS 40 grms

dispositivo médico de uso quirúrgico desechable no estéril.

Non-sterile disposable surgical medical device.

FRENTE
FRONT

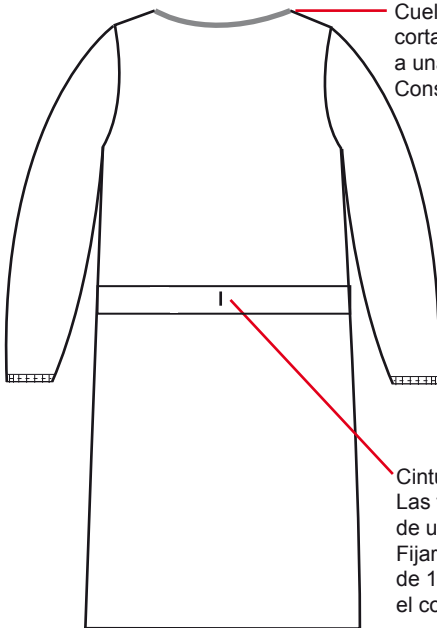

Cuello sesgado
cortar sesgo de entrada de 2.5cm, y salida de 0.6cm
a una ag con pestaña a 1/16", dejar sesgo libre de 24cm a cada lado
Consumo sesgo al hilo para tela de 2 mtrs de ancho es de 0.016


Binding on neck,
leaving 24 cm free at each end to form strips
(cut bias 2.5cm width)
Bias consumption: 0.016 (in the direction of the warp.
For fabric of 2 mt width)

Puño con hilo resorte
va cosido en fileteadora puntada sencilla
sleeve opening with elasticized thread,
sew with serged stitch

Cinturon de 4cm de ancho, puntas cuadradas
Las tiras se cortan por carretas al hilo
de un ancho de 4cm,
Fijar cinturon en el centro en maq/plana con un remate vertical
de 1cm (lleva perforado para ubicar centro de cinturon)
el consumo para el cinturon tela de 160cm de ancho es de 0.04 (al hilo)

4cm wide belt, square tips
The strips are cut to the warp in spool of a width of 4cm,
Sew the belt in the center with 1cm lockstitch vertical bactack
(it has perforations to locate the center of the belt)
Belt consumption: 0.04 (in the direction of the warp.
For fabric of 1.60 mt width)

ESPALDA
BACK

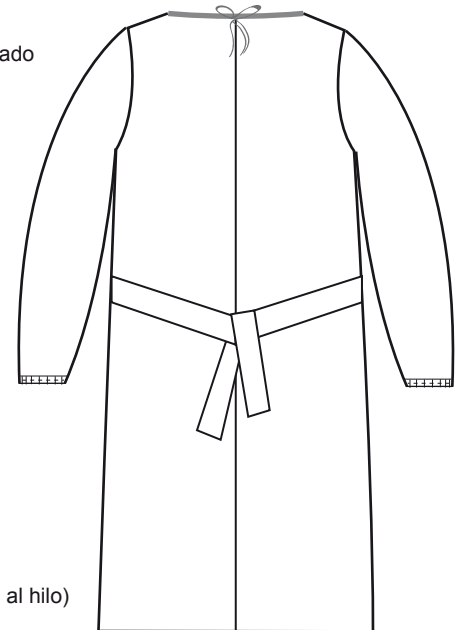

Costuras: hombros, sisa en maquina filetadora con puntada sencilla.

Hilo costura filete sencillo: Hilo en aguja calibre 120 y loopers con nylon texturizado

9 a 10 puntadas por pulgada

Seams: shoulders and armhole in single-stitch serger machine.

Single serged stitch thread: 120 gauge needle thread and loopers with textured nylon thread

9 to 10 stitches per inch

EVERFIT

MODELOS: 101610 STYLE: 101610

BATA AZUL HOSPITALARIA DESECHABLE

DISPOSABLE BLUE HOSPITAL DRESS

TELA SS 40 grms

FABRIC SS 40 grms

dispositivo médico de uso quirúrgico desechable no estéril.


Non-sterile disposable surgical medical device.

Medidas en cms


Measurements in cms

N°	MEDIDAS Measurement	DESCRIPCION DE MEDIDAS DESCRIPTION OF MEASURES	M (TALLA UNICA) M (ONE SIZE)	TOL +/-
1	Hombro a Hombro Shoulder to Shoulder	Medida horizontal; de hombro a hombro (horizontal measurement)	52.00	1
2	Largo de manga Sleeve Length	Medida lineal; tomada desde el cuello hasta ruedo de la manga linear measurement, taken from neck to sleeve hem	73.00	1
3	1/2 de puño relajado Half Cuff Relaxed	Medida horizontal Horizontal measurement	8.00	0.7
4	1/2 contorno de vuelo Half Sweep	Medida horizontal; de costado a costado por el ruedo Horizontal measurement, side to side by the edge	67.00	1.3
5	Largo centro frente Front center length	Medida vertical; desde centro escote frente, hasta ruedo Vertical measurement; from center neckline to front, to hemline	98.00	1.3
6	Medida de cinturón terminado Finished Belt Measurement	Medida a lo largo del cinturón Measure along the belt	160.00	1

FRENTE
FRONT

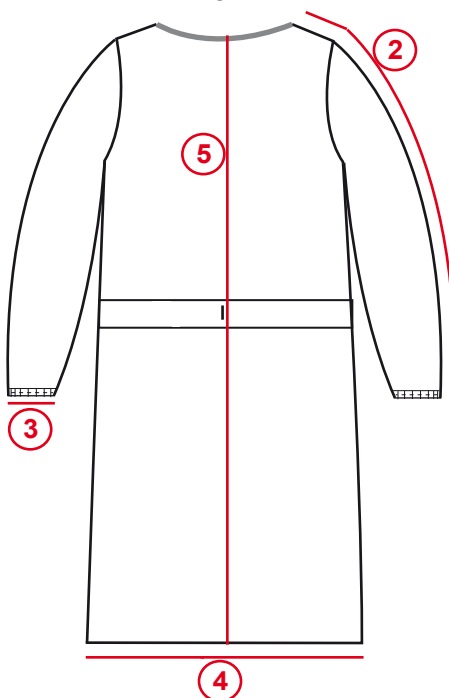

ESPALDA
BACK

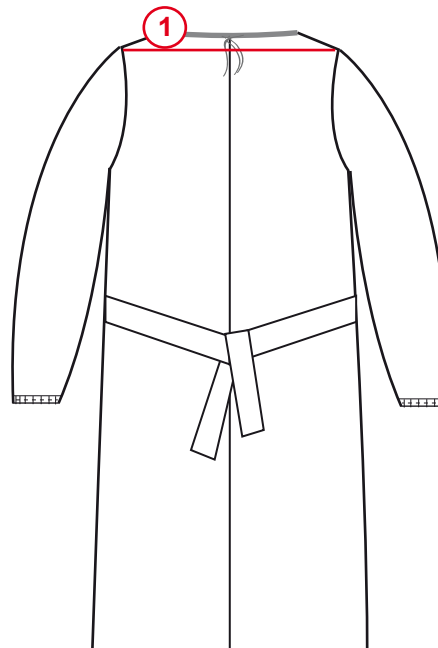

EVERFIT

MODELO: 101611

STYLE: 101611

PIJAMA AZUL HOSPITALARIA DESECHABLE

BLUE PAJAMA DISPOSABLE HOSPITAL


TELA SS 40 grms

FABRIC SS 40 grms


dispositivo médico de uso quirúrgico desechable no estéril.

Non-sterile disposable surgical medical device.

DELANTERO
FRONT

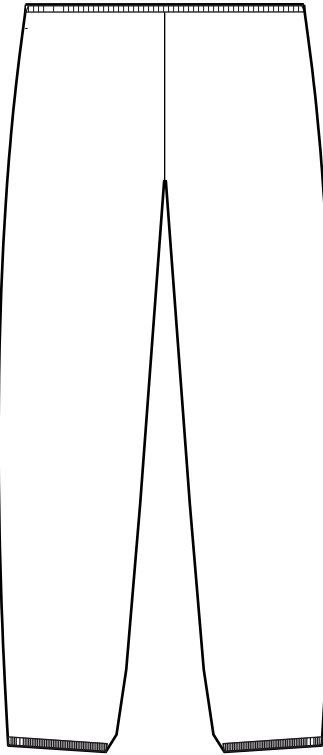

TRASERO
BACK

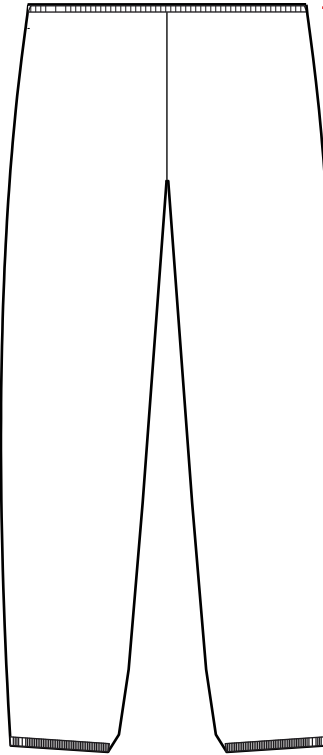

Resorte cintura de 6mm
en maq/fileteadora con puntada sencilla

6mm elastic waistband,
sewing in a serger machine, single stitch

Bota con hilo resorte
va cosido en fileteadora sencilla
Bottom hem with elasticized thread,
sew with serged stitch

Costuras entrepierna, tiro trasero , tiro delantero en maquina fileteadora puntada sencilla

Hilo costura filete sencillo: Hilo en aguja calibre 120 y loopers con nylon texturizado

9 a 10 puntadas por pulgada

Inseam, back seam, front seam on single stitch serger machine

Single serged stitch thread: 120 gauge needle thread and loopers with textured nylon thread

9 to 10 stitches per inch.

EVERFIT	MODELO: 101611	STYLE: 101611
	PIJAMA AZUL HOSPITALARIA DESECHABLE	E LUE PAJAMA DISPOSABLE HOSPITAL
	TELA SS 40 grms	FABRIC SS 40 grms


dispositivo médico de uso quirúrgico desechable no estéril.

Non-sterile disposable surgical medical device.

Medidas en cms

Measurements in cms

N°	MEDIDAS	DESCRIPCION DE MEDIDAS	M (TALLA UNICA)	TOL + / -
1	1/2 de cintura relajada Half waist relaxed	Medida horizontal; de costado a costado Horizontal mesurement, side to side	31.00	1.3
2	1/2 de cadera Half hip	Medida horizontal; de costado a costado por la parte mas amplia de la cadera Horizontal maeasurement, taken side to side by the wider point of the hip	60.50	1.3
3	1/2 de bota relajada Half bottom leg:	Medida horizontal; de costado a costado Half bottom leg: Horizontal measurement, side to side	21.00	1
4	Largo Total Exterior length	Medida vertical tomada x costado	103.00	1

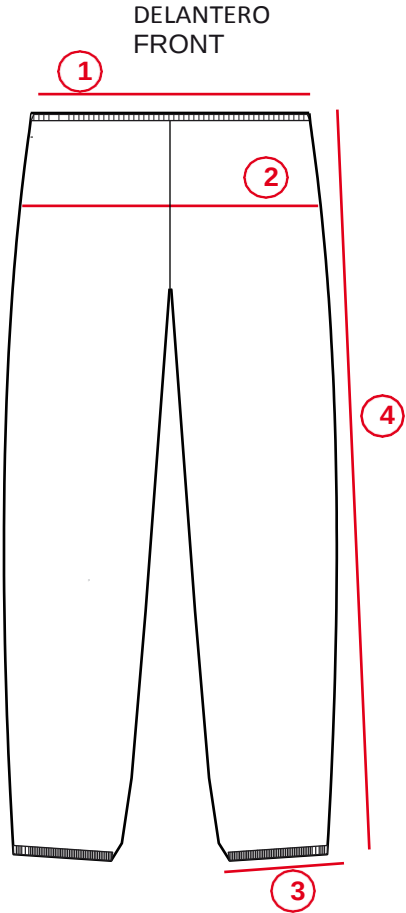

EVERFIT

MODELO: 101612

STYLE: 101612

POLAINA AZUL HOSPITALARIA DESECHABLE


BLUE DISPOSABLE HOSPITAL GATER

TELA SS 40 grms

FABRIC SS 40 grms

dispositivo médico de uso quirúrgico desechable no estéril.

Non-sterile disposable surgical medical device.

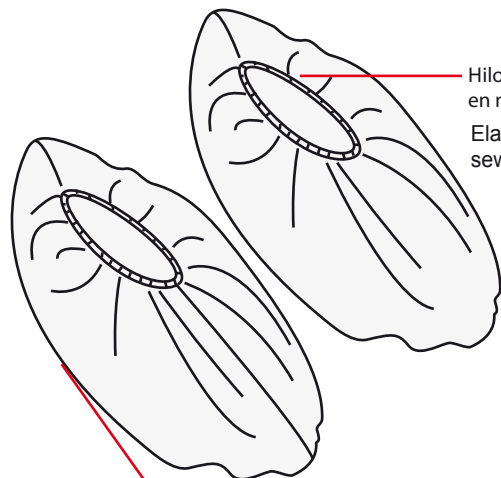


Hilo resorte
en maq/fileteadora puntada sencilla
Elastic thread,
sewing with single stitch serger machine

Hilo resorte en base de polaina en maq/plana
20cm terminado

The gater is by pair,
sewing the ends with single stitch serger machine
20cm finished

Half elastic contour (relaxed):
15 cm +/- 1cm

Mitad contorno elástico (relajado)
15cm +/- 1cm de tolerancia

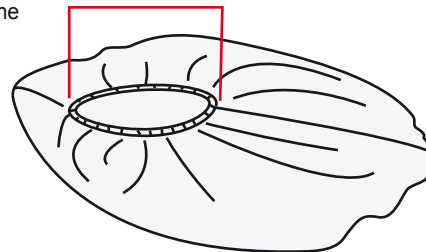

LAS POLAINAS VAN POR PAR

Cerrar extremos en maq/fileteadora puntada sencilla

Hilo costura filete sencillo: Hilo en aguja calibre 120 y loopers con nylon texturizado

9 a 10 puntadas por pulgada

The gater is by pair, sewing the ends with single stitch serger machine.

Single serged stitch thread: 120 gauge needle thread and loopers with textured nylon thread

9 to 10 stitches per inch